

Kits voor oppervlaktemonsternames



Deze kit bevat vloeibare oplossingen met verschillende buffers of kweekmedia voor algemeen gebruik, voor toepassing in omgevingsmonsternames.


Neutraliserende oplossingen (PBS en zoutoplossing)

Een neutraliserende oplossing wordt aanbevolen voor het detecteren van micro-organismen op zuivel- en voedingsapparatuur die gedesinfecteerd is met chloor of quaternaire ammoniumverbindingen. Het medium bevat meestal lecithine, polysorbaat 80 en natriumthiosulfaat, die worden gebruikt om antibacteriële of antimicrobiële reinigingsmiddelen op oppervlakken te neutraliseren, waardoor aanwezige bacteriën duidelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebufferd peptonwater

Gebufferd peptonwater is een niet-selectieve, voorverrijkte bufferoplossing. Het helpt beschadigde cellen te herstellen en vergemakkelijkt het terugvinden van doelbacteriën in monsters, waardoor de detectie van Salmonella in voedsel- en zuivelverwerkingsbedrijven mogelijk wordt.

Gebruiksaanwijzing

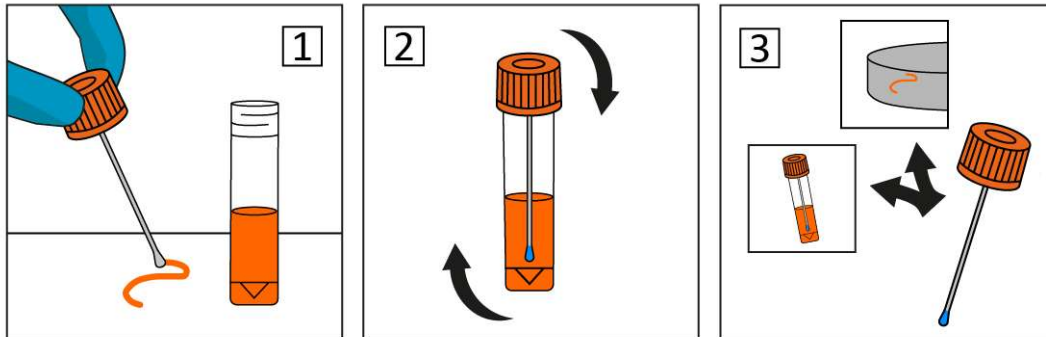

1. Bevochtig de punt van een wattenstaafje met de oplossing uit het flesje en verzamel vervolgens het monster door over de nodige oppervlakten te wrijven.
2. Dompel de kop van het wattenstaafje opnieuw onder in de oplossing en schud het buisje krachtig.
3. Breng het monster op het geschikte medium aan en incubeer voor analyse.

Dit product is alleen bedoeld voor laboratoriumgebruik. Het is niet bedoeld voor ziektediagnose.